

TAMI[®] Guide

Manuale utente — Occhiali smart TAMI[®]

Version 1.0

Last updated Giugno 2026

Platform iOS e Android

INDICE

Per iniziare

Introduzione

Navigazione nell'app

Panoramica del controllo dispositivo

Impostazioni dispositivo

Stato della batteria

Impostazioni app e account

Installazione dell'app

Configurazione iniziale

Connessione a un dispositivo

Trova i miei occhiali


Aggiornamento firmware (OTA)

Posta in arrivo e newsletter

Risoluzione dei problemi

Per iniziare

Benvenuto in TAMI[®] — il tuo occhiale per la mobilità assistiva. Questo manuale ti guiderà nella configurazione, personalizzazione e utilizzo quotidiano del tuo dispositivo e dell'app companion.

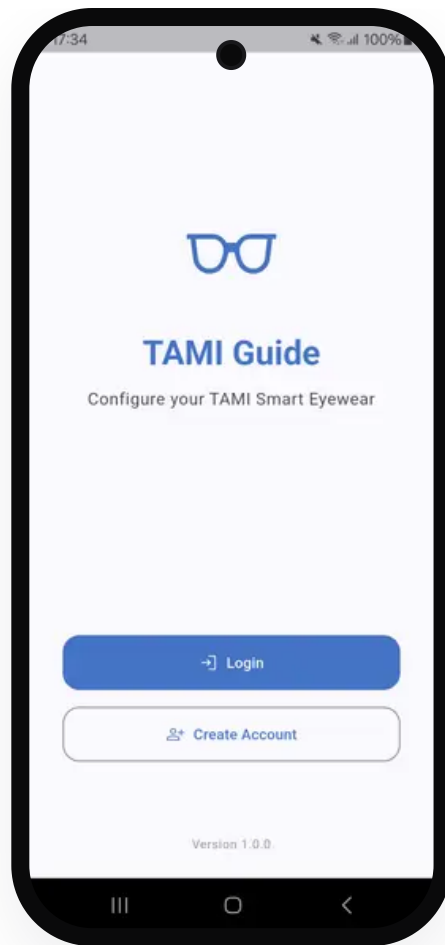

Cosa ti serve

- Occhiali smart TAMI®
- Uno smartphone con iOS o Android
- Connettività Bluetooth attiva
- Connessione a Internet per il download iniziale dell'app

❗ Suggerimento: tieni carichi i tuoi occhiali TAMI® prima di iniziare la configurazione. Una ricarica completa richiede circa 4-5 ore e garantisce fino a 5 ore di uso continuo.

Prima di iniziare

1. Carica completamente i tuoi occhiali TAMI® usando il cavo di ricarica magnetico incluso.
2. Assicurati che il Bluetooth sia attivo sul tuo telefono.

Installazione dell'app

L'app Tami Guide è disponibile sia su iOS sia su Android. Scaricala e installala per gestire i tuoi occhiali da remoto.

iOS

1. Apri l'App Store.
2. Cerca "Tami Guide".
3. Tocca Ottieni, poi autentica con Face ID, Touch ID o il tuo Apple ID.
4. Al termine dell'installazione, tocca Apri.



Scansiona per scaricare

Android

1. Apri Google Play Store.
2. Cerca "Tami Guide".
3. Tocca Installa.
4. Concedi i permessi richiesti, poi tocca Apri al termine dell'installazione.



Scansiona per scaricare

Introduzione

L'app Tami Guide ti permette di configurare e gestire i tuoi occhiali smart TAMI® tramite Bluetooth Low Energy (BLE). Attraverso l'app puoi:

- Associare e connetterti ai tuoi occhiali smart TAMI®
- Regolare l'intensità e il comportamento del feedback vibratorio
- Configurare il raggio di rilevamento
- Aggiornare il firmware del dispositivo via etere (OTA)
- Localizzare i tuoi occhiali con la funzione Trova i miei occhiali


- Ricevere notifiche di aggiornamento firmware e la newsletter mensile nella Posta in arrivo dell'app

Configurazione iniziale

4.1 Primo avvio e onboarding


Alla prima apertura dell'app, un tutorial di onboarding in 4 passaggi presenta le funzionalità principali.

Slide	Content
1 · Benvenuto	Benvenuto — introduzione a Tami Guide
2 · Connetti	Connetti — accoppiamento, modalità interno/esterno, feedback vibratorio e audio
3 · Gestisci	Gestisci — aggiornamenti OTA, Trova i miei occhiali, monitoraggio batteria
4 · Resta aggiornato	Resta aggiornato — notifiche di aggiornamento firmware e newsletter mensile

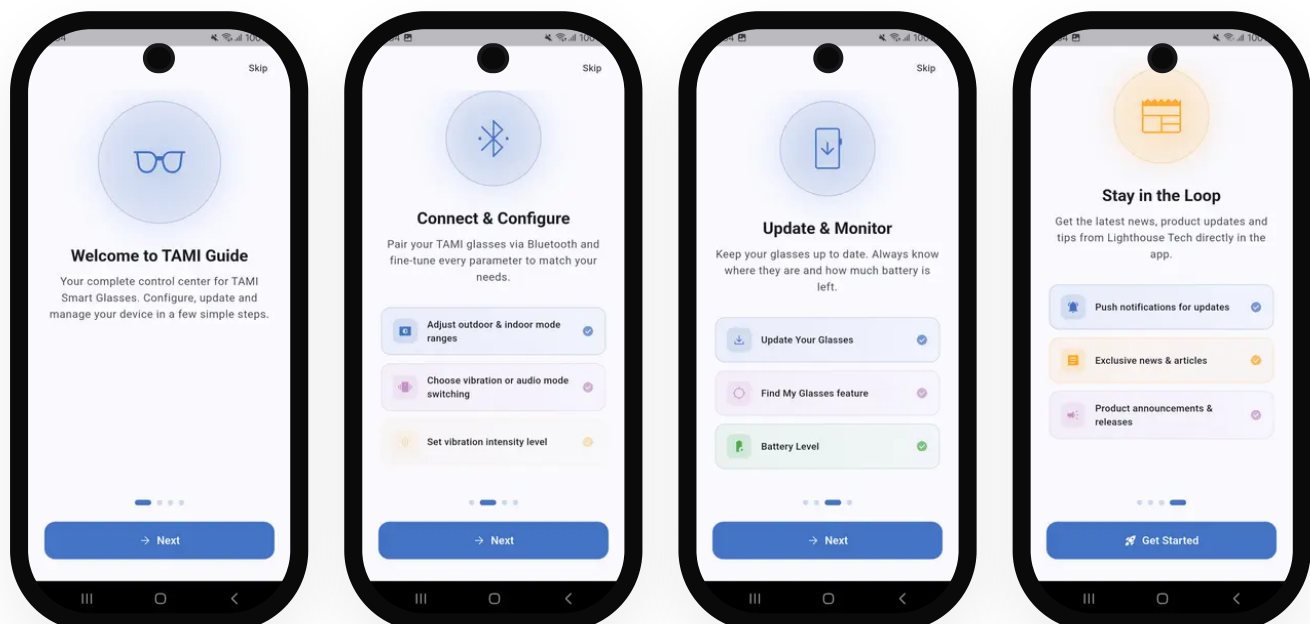

4.2 Registrazione account e accesso

1. Tocca Registrati per creare un nuovo account, oppure Accedi se ne hai già uno.
2. Inserisci il tuo indirizzo email e la password.
3. Dopo l'autenticazione verrai portato alla schermata Home principale.

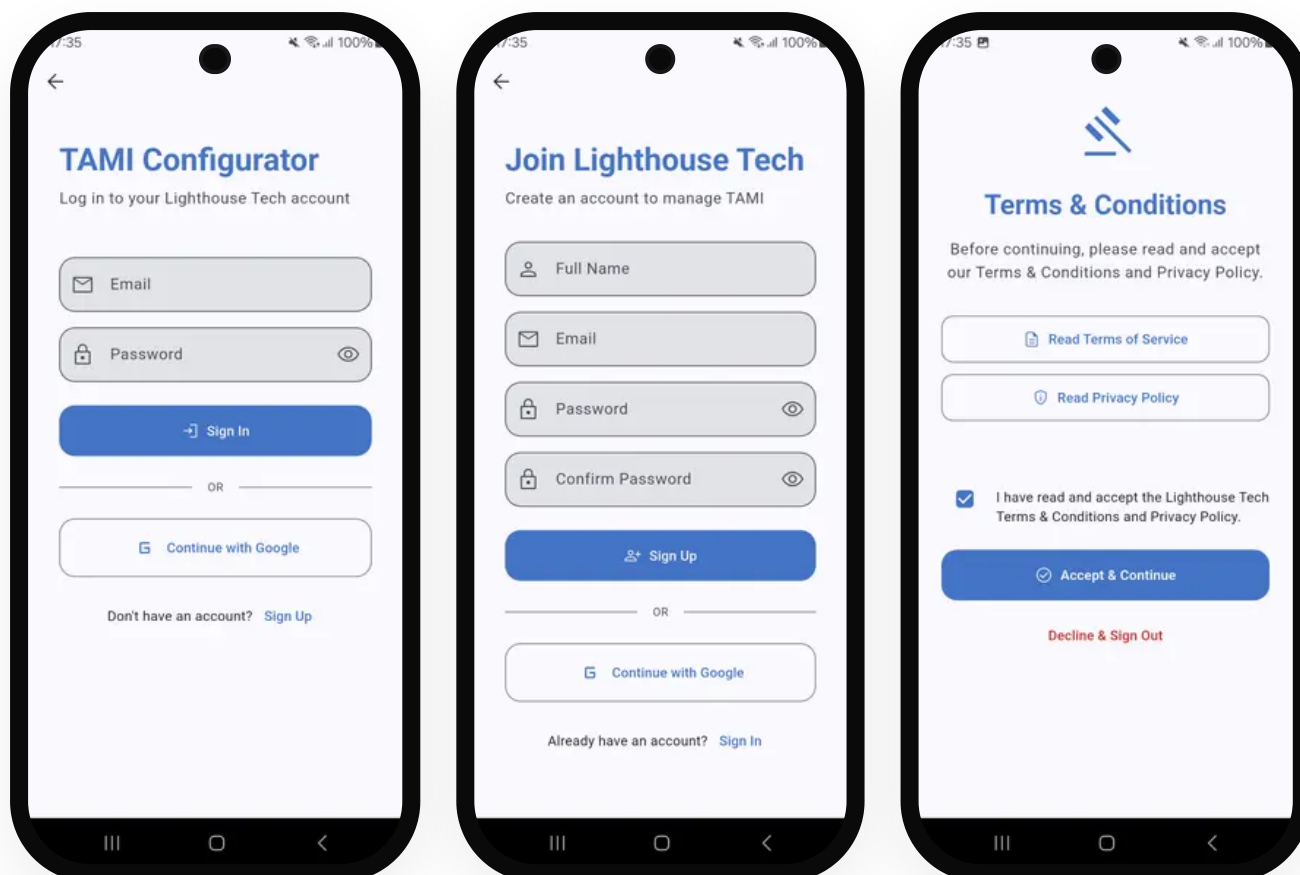


Navigazione nell'app

L'app ha una barra di navigazione inferiore con tre schede:

Tab	Icon	Description
Home	Icona Home	Rilevamento, connessione e controllo dei dispositivi
Posta in arrivo	Icona Posta in arrivo	Notifiche di aggiornamento firmware e newsletter (badge non letti)
Impostazioni	Icona Impostazioni	Impostazioni dell'app e gestione dell'account

Connessione a un dispositivo

1. Apri la scheda Home.
2. Assicurati che il Bluetooth sia attivo sul tuo telefono.
3. Accendi i tuoi occhiali TAMI® — appariranno nell'elenco Dispositivi disponibili entro pochi secondi.
4. Usa il campo di ricerca in alto per filtrare per nome dispositivo, se necessario.
5. Tocca un dispositivo dall'elenco per connetterti.
6. Durante la connessione apparirà una finestra di avanzamento. Attendi il completamento.
7. Una volta connesso, il dispositivo si sposta nella sezione Dispositivi connessi in alto nello schermo.

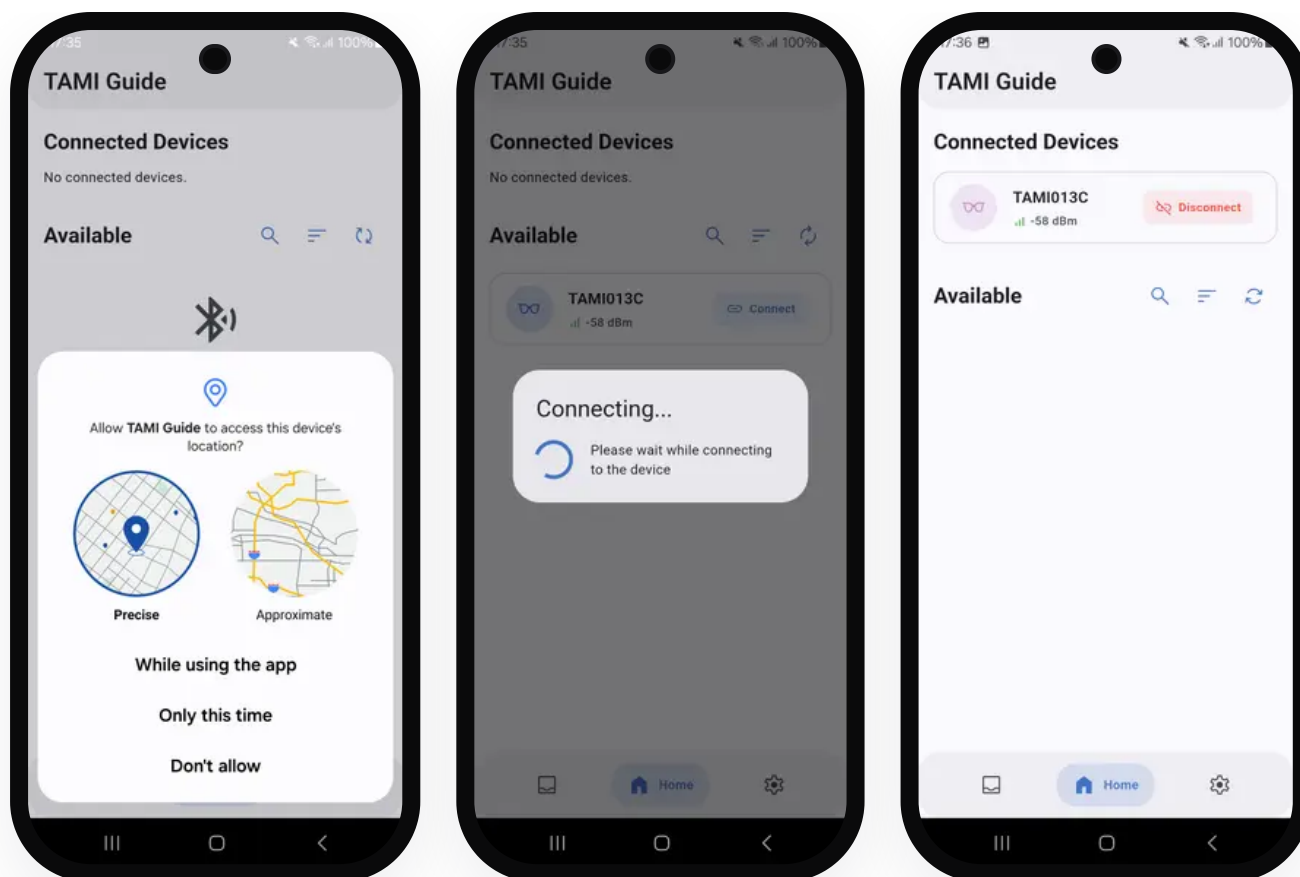

L'app supporta la connessione a un solo dispositivo alla volta in uso normale. La connessione simultanea a più dispositivi è possibile solo quando entrambi sono in modalità manutenzione (ad esempio durante gli aggiornamenti firmware).


Disconnettere un dispositivo

Scorri lateralmente la scheda del dispositivo connesso, poi conferma la disconnessione.

Panoramica del controllo dispositivo

Tocca la scheda di un dispositivo connesso per aprirne la pagina di controllo. La pagina è organizzata nelle seguenti schede azione:

Card	Description
Batteria	Visualizza i livelli di batteria master e slave e lo stato di ricarica
Impostazioni	Apri le Impostazioni dispositivo (vibrazione, raggio, ecc.)
Trova i miei occhiali	Fa suonare/vibrare gli occhiali per localizzarli
Riavvia	Riavvia il dispositivo (richiede conferma)
Aggiornamento FW	Visibile solo quando il dispositivo è in modalità manutenzione

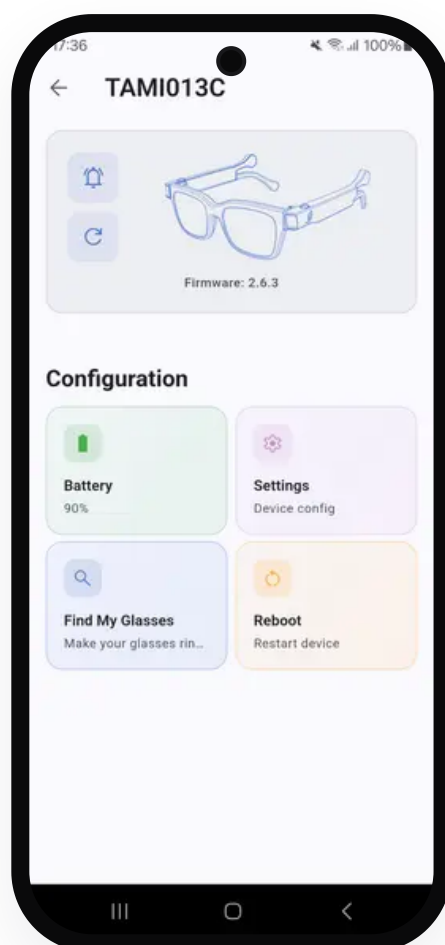


Trova i miei occhiali

Usa questa funzione quando non riesci a localizzare fisicamente i tuoi occhiali.

1. Dalla pagina di controllo del dispositivo, tocca Trova i miei occhiali.

2. Si aprirà una finestra che mostra lo stato attuale.
3. Tocca Avvia — gli occhiali inizieranno a suonare/vibrare.
4. Un'icona animata pulsante conferma che gli occhiali stanno suonando attivamente.
5. Tocca Interrompi (mostrato in rosso) per silenziare manualmente gli occhiali.
6. Gli occhiali si fermeranno anche automaticamente dopo un timeout preimpostato.
7. Tocca Chiudi in qualsiasi momento per chiudere la finestra (questo interrompe anche il suono).

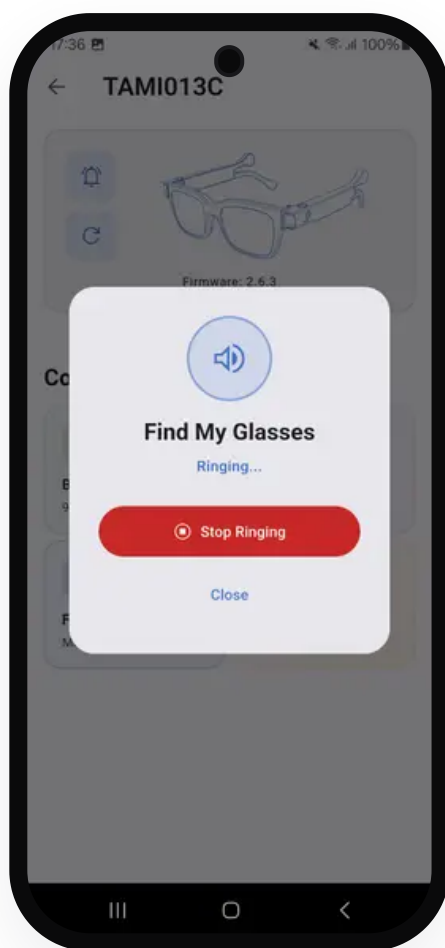

Impostazioni dispositivo

Dalla pagina di controllo del dispositivo, tocca Impostazioni per accedere al pannello di configurazione completo.

9.1 Intensità della vibrazione

Questa impostazione controlla quanto è forte il feedback vibratorio.

1. Nelle Impostazioni dispositivo, individua la sezione Intensità della vibrazione.
2. Sposta il cursore per selezionare il livello desiderato.
3. L'impostazione viene salvata automaticamente al rilascio del cursore.

Posizione cursore	Visualizzazione	Comportamento
0	Off	Nessuna vibrazione
1	Lv. 1	Intensità bassa
2	Lv. 2	Intensità media
3	Lv. 3	Intensità alta
4	Lv. 4	Intensità massima

9.2 Comportamento del feedback (raggio)

Questa sezione ti permette di configurare come e quando gli occhiali forniscono il feedback in base alla distanza dall'ostacolo. Per prima cosa, seleziona l'ambiente operativo usando il selettore in alto nella sezione:

Modalità	Ideale per
Corto raggio (Interno)	Spazi ristretti, distanze di rilevamento più brevi
Lungo raggio (Esterno)	Ambienti aperti, distanze di rilevamento maggiori

9.3 Effetto cambio modalità

Questa impostazione determina il tipo di feedback prodotto dagli occhiali quando si passa tra modalità Corto raggio e Lungo raggio.



1. Nelle Impostazioni dispositivo, trova la sezione Effetto cambio modalità.
2. Seleziona una delle due opzioni: Vibrazione o Audio.
3. La selezione viene salvata immediatamente.

9.4 Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni del dispositivo ai valori originali di fabbrica.

 **Attenzione:** questa azione non può essere annullata. Tutte le configurazioni personalizzate andranno perse.

1. Nelle Impostazioni dispositivo, scorri fino alla sezione Ripristina impostazioni di fabbrica (evidenziata in rosso).
2. Tocca il pulsante di ripristino.
3. Apparirà una finestra di conferma — tocca Conferma per procedere.
4. Il dispositivo verrà ripristinato e le impostazioni torneranno ai valori predefiniti.

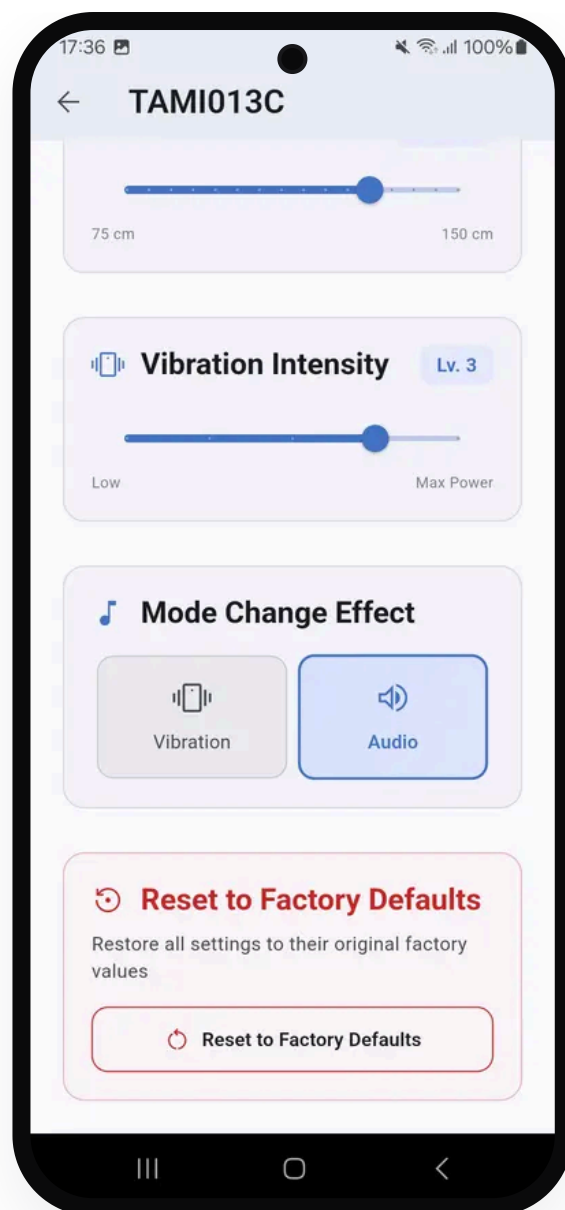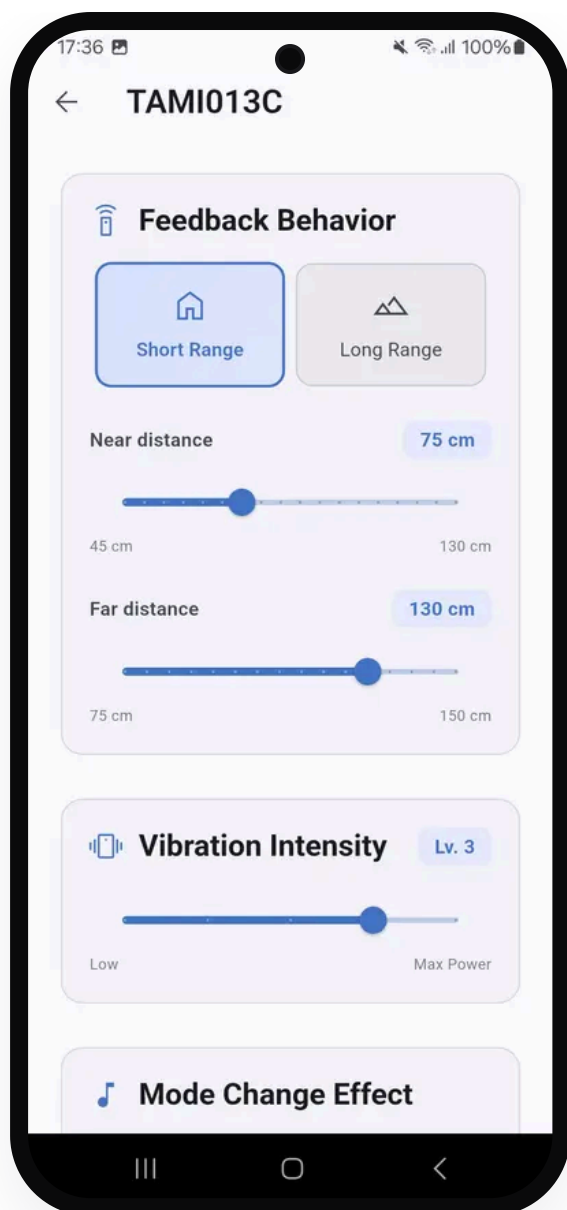


Aggiornamento firmware (OTA)

L'app supporta aggiornamenti firmware via etere (Over-The-Air, OTA) per mantenere aggiornati i tuoi occhiali.

- ⚡ Importante: il dispositivo deve essere in modalità manutenzione prima di poter avviare un aggiornamento firmware. Per entrare in modalità manutenzione, assicurati che le stanghette siano collegate a una presa di corrente, poi tieni premuto il pulsante per 10 secondi. Il sistema si divide in due unità distinte (sinistra e destra). La scheda Aggiornamento FW apparirà nella pagina di controllo del dispositivo, e l'aggiornamento firmware deve essere eseguito su entrambe le unità.

1. Dalla pagina di controllo del dispositivo, tocca Aggiornamento FW.
2. La versione firmware attuale viene mostrata in alto nella pagina.
3. Tocca Seleziona file firmware, poi scegli il firmware desiderato dal menu a tendina e tocca Conferma.
4. Il caricamento inizierà — una barra di avanzamento mostra la percentuale di caricamento.
5. Al termine del caricamento, il dispositivo si riavvierà automaticamente.
6. L'app effettuerà la scansione e si riconnetterà al dispositivo entro ~40 secondi.
7. Dopo la riconnessione, l'app verifica l'hash del firmware per confermare l'aggiornamento riuscito.
8. Torna alla scheda Aggiornamento FW nella pagina di controllo del dispositivo per confermare e completare l'aggiornamento.
9. Se anche l'unità slave necessita di aggiornamento, ti verrà chiesto di procedere.
10. Esci dalla modalità manutenzione tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.

⊗ Non chiudere l'app né disattivare il Bluetooth durante l'aggiornamento.

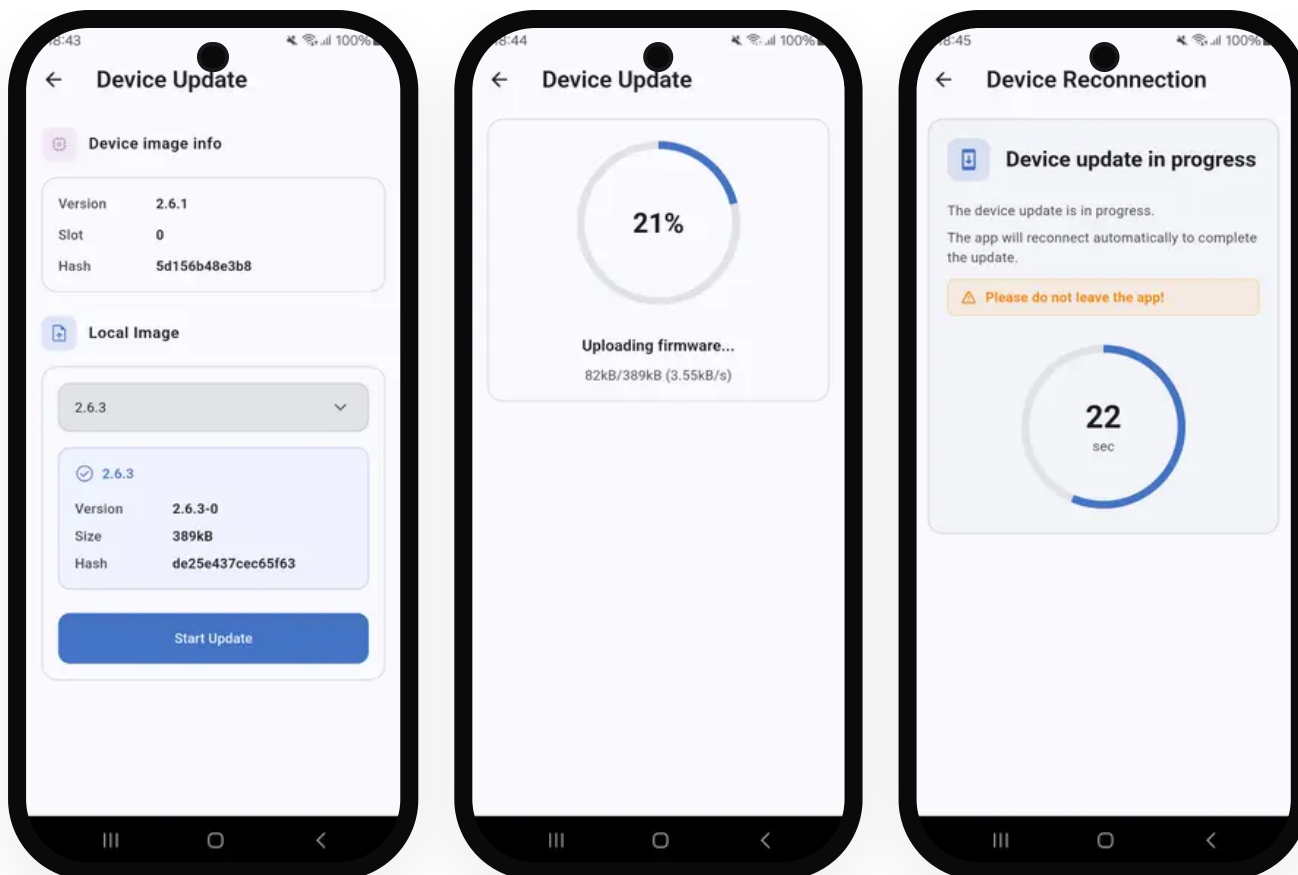

Stato della batteria

1. Dalla pagina di controllo del dispositivo, tocca Batteria.
2. Una finestra mostra: percentuale di batteria e stato di ricarica dell'unità master, percentuale di batteria dell'unità slave (se disponibile).

- **Verde** — carica sufficiente
- **Arancione** — batteria scarica
- **Rosso** — livello critico

Posta in arrivo e newsletter

La scheda Posta in arrivo fornisce le notifiche di aggiornamento firmware e gli articoli della newsletter mensile.

- Un badge sull'icona della scheda mostra il numero di messaggi non letti.

- Tocca un elemento nell'elenco per leggere l'articolo completo.
- Gli elementi vengono contrassegnati automaticamente come letti all'apertura.

Impostazioni app e account


Apri la scheda Impostazioni (icona a ingranaggio) per gestire il tuo account e le preferenze dell'app.

Account

Azione	Descrizione
Info profilo	Mostra il tuo nome, email e tipo di account
Esci	Termina la sessione corrente
Elimina account	Rimuove permanentemente l'account (richiede conferma)
Segnala un bug	Apri una finestra per inviare una segnalazione di bug

Informazioni

Voce	Descrizione
Informativa sulla privacy	Link all'informativa sulla privacy
Termini di servizio	Link ai termini di servizio
Sito web	Link al sito web di LHT
Versione app	Versione attuale mostrata sull'intestazione delle impostazioni

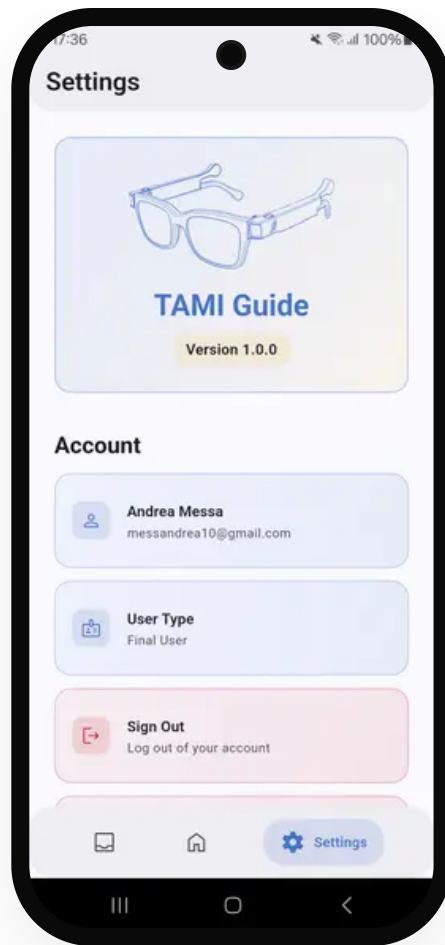

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo non appare tra i Dispositivi disponibili	Assicurati che il Bluetooth sia attivo, che il dispositivo sia acceso e che tu sia nel raggio d'azione. Trascina verso il basso per aggiornare l'elenco.
La connessione fallisce o si interrompe	Avvicinati al dispositivo e riprova. Riavvia sia l'app sia gli occhiali.
Impossibile avviare l'aggiornamento FW	Il dispositivo deve essere in modalità manutenzione. Contatta il tuo distributore o consulta la documentazione del dispositivo.
"Trova i miei occhiali" non suona	Assicurati che il dispositivo sia connesso (visibile in Dispositivi connessi). Se la finestra si apre ma non succede nulla, gli occhiali potrebbero essere fuori dal raggio BLE.
L'aggiornamento firmware fallisce per hash non corrispondente	Assicurati di usare il file .bin corretto e non corrotto. Contatta il supporto LHT se il problema persiste.
La vibrazione non si avverte	Verifica che l'Intensità della vibrazione non sia impostata su Off. Controlla anche che le impostazioni di distanza Vicino/Lontano siano adatte all'ambiente.
L'app mostra una newsletter non aggiornata	Trascina verso il basso l'elenco della Posta in arrivo per aggiornare. Controlla la connessione a Internet.

Lighthouse Tech

Per assistenza, invia una segnalazione di bug dalla scheda Impostazioni, visita lighthousetech.ch oppure scrivi a dev@lighthousetech.ch